

MOVA Fresh 20

Instrukcja obsługi



MOVA

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia

- Ze szczoteczek do zębów mogą korzystać dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub udzielono im instruktażu na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie należy zezwalać, by używały urządzenia do zabawy. Dzieciom pozostającym bez nadzoru nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub poinstruowano je w zakresie użytkowania urządzenia.
- Dzieciom należy zapewnić opiekę i nadzór oraz dopilnować, by nie używały urządzenia do zabawy.
- Ten produkt zawiera niewymienny akumulator. Jeśli poziom naładowania akumulatora pozostaje stale niski, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Pozbywając się produktu, należy postępować zgodnie z instrukcją utylizacji akumulatora.
- Nie wkładać urządzenia ani akumulatora do ognia ani nie narażać ich na działanie wysokich temperatur, ponieważ grozi to wyciekami elektrolitu z akumulatora i wybuchem.
- Produkt należy ładować w zakresie temperatur od 0°C do 45°C.
- Do ładowania tego produktu należy używać ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V^{max}.
- Zabrania się dokonywania modyfikacji lub samodzielnych napraw urządzenia przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu lub przewodu zasilającego, albo wycieku elektrolitu z akumulatora, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania produktu. Naprawę należy zlecić serwisantom autoryzowanym przez producenta.
- Nie czyścić produktu rozcieńczalnikami do farb, benzenem, alkoholem ani żadnymi innymi środkami chemicznymi.
- Niniejszy produkt jest urządzeniem elektrycznym klasy III. Maksymalna zmierzona moc wyjściowa zasilacza (power banku) nie przekracza 15 W. Napięcie znamionowe zasilacza (powerbanku) powinno wynosić 5 V^{max}, a znamionowe natężenie prądu wyjściowego 1 A, przy czym zasilacz musi spełniać wymagania określone dla obwodów bardzo niskiego napięcia (SELV).

Środki ostrożności podczas korzystania z elektrycznej szczoteczki do zębów

- Przy pierwszym użyciu tego produktu może pojawić się lekkie krwawienie z dziąseł lub dyskomfort w obszarze zębów, ponieważ dziąsła nie są jeszcze przyzwyczajone do skutecznego czyszczenia. Na początek można wybrać tryb delikatny lub niestandardowy tryb delikatniejszego szczotkowania. Zazwyczaj zjawisko to zanika po upływie 1-2 tygodni.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Środki ostrożności podczas korzystania z elektrycznej szczoteczki do zębów

- Jeśli krwawienie się utrzymuje dłużej niż przez dwa tygodnie, przestań używać produktu i skonsultuj się ze stomatologiem.
- Użytkownicy z ostrą chorobą przyzębia lub przechodzące leczenie stomatologiczne, ortodontyczne lub implantologiczne powinny używać tego produktu pod nadzorem stomatologa.
- Ten produkt spełnia normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektromagnetycznych. Wszelkie wątpliwości związane z rozrusznikami serca i innymi wszczepionymi urządzeniami należy omówić z lekarzem lub producentem tych wszczepionych urządzeń przed użyciem tego produktu.
- Szczoteczki można używać wyłącznie z odpowiednią główką.
- Użycie innych główek szczoteczki może spowodować uszkodzenie powierzchni zębów i dziąseł oraz skrócić okres eksploatacji szczoteczki elektrycznej. Zalecane jest wymienianie główki szczoteczki co 3 miesiące, aby utrzymać właściwości czyszczące szczoteczki oraz czystość główki.

Konserwacja

- Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić główkę szczoteczki, dzięki czemu zapobiegnie się rozwojowi bakterii.
- Główną szczoteczki należy regularnie wymieniać, najlepiej co 3 miesiące.
- Szczoteczki nie należy długotrwale przechowywać w wilgotnym miejscu, gdyż grozi to rozwojem bakterii i uszkodzeniem baterii.
- Szczoteczki nie należy narażać na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, gdyż grozi to skróceniem żywotności baterii.
- Szczoteczki nie należy rzucać na podłogę ani narażać jej na uderzenia, gdyż grozi to uszkodzeniem jej wewnętrznych elementów.
- Obudowę oraz miejsce połączenia główki szczoteczki z korpusem należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się brudu.
- Jeżeli nie planuje się korzystania ze szczoteczki przez dłuższy czas, należy wyczyścić wszystkie jej elementy, a przechowywać ją w chłodnym, suchym miejscu, nie narażając jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Utylizacja akumulatora

Oddając ten produkt do utylizacji należy wyjąć z niego wbudowany akumulator, który należy przekazać do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nie zaleca się demontażu akumulatora w jakiejkolwiek innej sytuacji.


1. Przed wyjęciem akumulatora odłącz urządzenie od zasilania i całkowicie rozładuj akumulator.
2. Za pomocą odpowiedniego narzędzia otwórz dolną pokrywę szczoteczki elektrycznej i odłącz ją od korpusu.
3. Naciśnij do wewnątrz elementy zatraskowe po obu stronach, po czym wyjmij cały zespół akumulatora.
4. Przetnij przewód łączący akumulator z płytą główną w korpusie, wyjmij akumulator i przekaz go do utylizacji w wyznaczonym przez lokalne władze miejscu.

Wprowadzenie do produktu

Zawartość opakowania

Uchwyt szczoteczki elektrycznej × 1, Główka do wybielania zębów × 1, Główka do delikatnej pielęgnacji × 1, Etui na szczoteczkę do zębów × 1, Kabel ładujący typu C × 1, Instrukcja obsługi × 1

Opis części

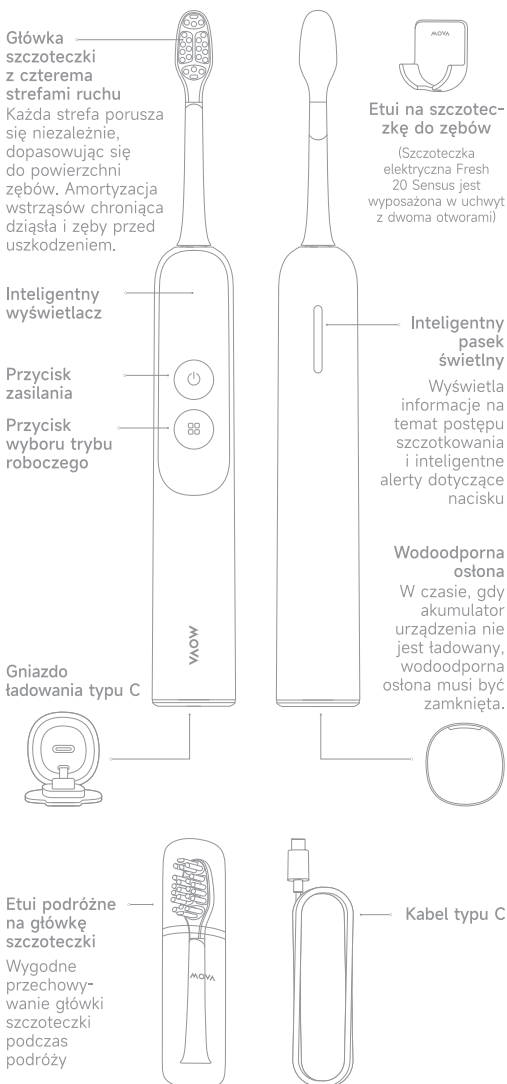

Funkcja i zastosowanie

Instrukcja użytkowania

- ① Włóż główkę szczoteczki do uchwytu
- ② Uruchamiając szczoteczkę po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk zasilania, aby wyłączyć tryb samolotowy. Podczas codziennego użytkowania szczoteczkę wystarczy podnieść, co spowoduje jej włączenie.



Długotrwałe
naciśnięcie

- ③ Start/Pauza: Krótkotrwałe naciśnij przycisk zasilania.
Zmiana trybu: Krótkotrwałe naciśnij przycisk trybu.
*Po 10 sekundach bezczynności szczoteczka automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.



Inteligentny

Tryb Inteligentny

Dostosuj szczoteczkę do własnych nawyków szczotkowania, wykorzystując sztuczną inteligencję



Delikatny

Tryb Delikatny

Odpowiedni dla osób początkujących oraz osób o wrażliwych zębach lub dziąsłach



Szczotkowanie

Tryb Szczotkowanie

Odpowiedni do codziennej pielęgnacji jamy ustnej i skutecznego czyszczenia ogólnego




Wybielanie

Tryb Wybielanie


Odpowiedni dla osób pragnących mieć widocznie bielsze zęby

Inteligentny pasek świetlny


- Wyświetlacz postępu szczotkowania: W trakcie szczotkowania pasek świetlny stopniowo wypełnia się kolorem, informując o czasie trwania szczotkowania.
*Na rzeczywistym wyświetlaczu kolory mogą być inne.
- Przykład (na podstawie 120 sekund szczotkowania):
Pasek świetlny wygląda następująco:

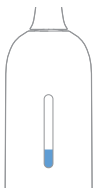


30s

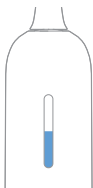

60s

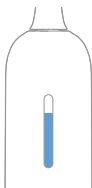

90s

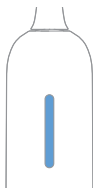


120s

Funkcja i zastosowanie

Inteligentny pasek świetlny

- Inteligentny alert nacisku: Jeśli podczas szczotkowania nacisk jest zbyt duży, pasek świetlny zmienia kolor na czerwony; jeśli nacisk jest zbyt słaby, pasek zmienia kolor na żółty.

*Na rzeczywistym wyświetlaczu kolory mogą być inne.

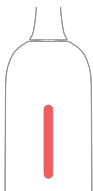

Nadmierny nacisk




Niewystarczający nacisk


Inteligentny wyświetlacz

- ① Podczas szczotkowania na ekranie wyświetlane są bieżące informacje o szczotkowaniu oraz przypomnienia.

*Rzeczywiste informacje wyświetlane na ekranie mogą być inne.

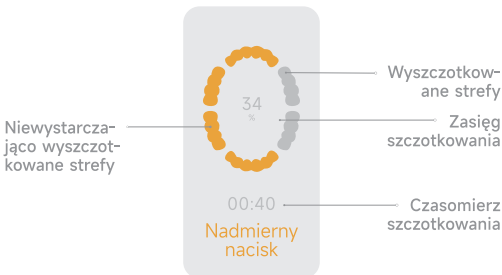

- ② Po szczotkowaniu na ekranie zostanie wyświetlony raport dotyczący szczotkowania, dzięki czemu można natychmiast zapoznać się ze stanem szczotkowania i stopniowo wykształcić prawidłowe nawyki szczotkowania.

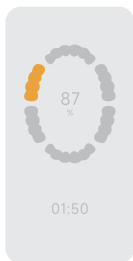

Aktualny raport na temat szczotkowania

Żółte obszary wskazują niewystarczająco wyszczotkowane strefy. Niezwłocznie ponownie wyszczotkuj te obszary.




Raport z obecności płytki nazębnej

Widoczny podczas korzystania z detektora wizualizacyjnego płytki nazębnej.

Funkcja i zastosowanie


Ustawiania funkcji

- Wciśnij przycisk trybu, co umożliwi włączenie menu ustawień, w którym możesz dostosować różne funkcje i skonfigurować ustawienia włączania/wyłączania.
- Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku zasilania: Potwierdź i wprowadź ustawienia
- Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku trybu: Dalej

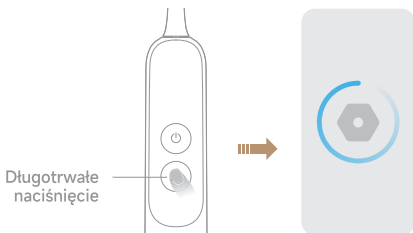

Skonfiguruj parametry szczotkowania

- W menu ustawień można dostosować tryb szczotkowania i odpowiednie parametry (intensywność wibracji, kąt szczotkowania i prędkość szczotkowania) do własnych potrzeb.

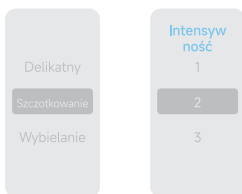

Skonfiguruj czas szczotkowania

- W menu ustawień można dostosować czas szczotkowania do własnych potrzeb.

Tryb samolotowy



- W menu ustawień można włączyć tryb samolotowy. Szczoteczki, w której włączono tryb samolotowy, nie można włączyć poprzez potrząśnięcie nią lub krótkotrwałe naciśnięcie przycisków.
- Kilukrotnie potrząśnięcie szczoteczką bez rozpoczęcia szczotkowania spowoduje automatyczne przełączenie na tryb samolotowy.
- Aby wyłączyć tryb samolotowy, naciśnij przycisk zasilania.



Funkcja i zastosowanie


Aktywowany głosem przełącznik przewodnictwa kostnego

- W menu ustawień włącz lub wyłącz funkcję komunikatów głosowych.

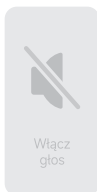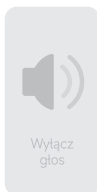


Ustawienia języka

- W menu ustawień wybierz odpowiedni język

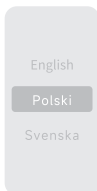

Przypomnienie o czasie użytkowania główki szczoteczki

- Liczbę dni pozostałych do końca użytkowania główki szczoteczki można sprawdzić w menu ustawień. Po wymianie główki szczoteczki licznik można zresetować.

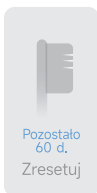

Ustawienia Fabryczne


- Wyzerowanie ustawień systemowych powoduje usunięcie danych i odłączenie urządzenia od telefonu komórkowego.



Funkcja i zastosowanie


Alarm o poziomie naładowania akumulatora

- Gdy poziom naładowania baterii szczoteczki jest niski, należy ją niezwłocznie naładować, gdyż może się potem nie uruchomić.

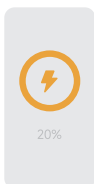

Niski poziom naładowania akumulatora

Niski poziom naładowania akumulatora, lecz szczoteczka nadal działa

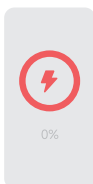

Niewystarczający poziom naładowania akumulatora

Przed użyciem akumulator szczoteczki należy naładować

Współpraca z aplikacją

- Zeskanuj kod QR umieszczony na stronie przewodnika po ekranie lub poniższy kod i pobierz aplikację MOVHome. Szczoteczka musi być włączona. Sparuj szczoteczkę z aplikacją, postępując zgodnie z instrukcjami aplikacji.
- W aplikacji można nie tylko dostosować dziesięciopozomowe parametry szczotkowania w trzech wymiarach na podstawie osobistych preferencji, ale także sprawdzić raporty na temat szczotkowania i skonfigurować ustawienia.




Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację MOVHome



Ładowanie

- Otwórz wodoodporną osłonę u dołu. W razie stwierdzenia obecności wilgoci w gnieździe ładowania, gniazdo należy wytrzeć do sucha.
- Ostrożnie otwórz wodoodporną osłonę znajdującą się na spodzie produktu. Nie należy ciągnąć jej zbyt mocno wzdłuż osi.
- Użyj kompatybilnego kabla ładującego typu C i zasilacza lub power banku spełniającego krajowe normy. Nie używaj ładowarek niskiej jakości;
- Podczas ładowania nie należy korzystać ze szczoteczki.
- Podczas ładowania szczoteczki do zębów nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach.

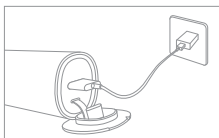

Podstawowe parametry

Nazwa produktu	MOVA Fresh 20 Electric Toothbrush		
Model	ATB25B		
Znamionowe napięcie wejściowevoltage	5V –	Znamionowa moc wejściowa	5 W
Klasa wodoszczelności	IPX8	Pojemność akumulatora	2000 mAh



Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację
MOVAhome.
Połącz się z elektryczną szczoteczką do
zębów MOVA.



Zeskanuj kod QR, aby wyświetlić
samouczek dotyczący produktu i
instrukcję obsługi w wersji
elektronicznej.



Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się

w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Używaj szczoteczek sonicznych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia, w tym końcówek i ładowarki. W przypadku widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy przetarcia, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Nie zanurzaj całkowicie urządzeń w wodzie, jeśli nie są oznaczone jako wodoodporne.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń wynikających z nadmiernej wilgoci.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Unikaj stosowania szczoteczek sonicznych na podrażnionej lub uszkodzonej skórze jamy ustnej.

- Nie kieruj strumienia irygatora bezpośrednio na zranienia lub wrażliwe miejsca w jamie ustnej.
- Osoby z aparatami ortodontycznymi lub implantami powinny skonsultować się ze stomatologiem przed użyciem szczoteczki sonicznej.
- Dzieci mogą używać szczoteczek sonicznych wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

Ryzyko związane z elementami elektronicznymi:

- Używaj wyłącznie ładowarek i kabli dostarczonych przez producenta, aby uniknąć ryzyka przegrzania baterii.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia elektrycznego (np. nieregularne działanie, nagrzewanie się).
- Produkty ładowane przez USB należy podłączać wyłącznie do kompatybilnych źródeł zasilania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Używaj końcówek odpowiednich do swoich potrzeb.

- Zawsze stosuj odpowiednią pastę do zębów, najlepiej rekomendowaną przez producenta szczoteczki.
- Ustaw tryb pracy szczoteczki na delikatny, jeśli dopiero zaczynasz używanie urządzeń sonicznych.
- Dopasuj siłę strumienia wody irygatora do swoich potrzeb. Na początek wybierz delikatny tryb, szczególnie jeśli masz wrażliwe dziąsła.
- Regularnie uzupełniaj zbiornik irygatora wodą lub specjalistycznym płynem do higieny jamy ustnej.
- W przypadku szczoteczek sonicznych do ciała używaj odpowiednich nakładek do wybranego obszaru pielęgnacji.

Konserwacja i przechowywanie:

- Po każdym użyciu dokładnie opłucz szczoteczkę i osusz ją przed przechowywaniem.
- Regularnie wymieniaj końcówki szczoteczki – zaleca się to co 3 miesiące lub częściej w przypadku intensywnego użytkowania.
- W przypadku urządzeń z wbudowanym akumulatorem, ładuj je zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Osoby z problemami stomatologicznymi, takimi jak nadwrażliwość zębów czy choroby dziąseł, powinny skonsultować się z dentystą przed rozpoczęciem używania szczoteczek sonicznych lub irygatorów.
- Regularnie obserwuj reakcje swojej skóry i dziąseł. W przypadku podrażnień przerwij użytkowanie urządzenia i skonsultuj się z lekarzem.
- Stosuj urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem – szczotki soniczne do ciała nie powinny być używane na skórze twarzy, a irygatory wyłącznie w jamie ustnej.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku zauważenia problemów z działaniem urządzenia (np. spadku mocy, nieszczelności irygatora, uszkodzonych końcówek) należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- Do wymiany końcówek, akcesoriów czy części zamiennych używaj wyłącznie oryginalnych

produktów zalecanych przez producenta.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzeń – naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez specjalistów w autoryzowanych punktach serwisowych.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz trwałości materiałów.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas

ładowania. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić o deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom

jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

XingKuang Innovation Technology
(Suzhou) Co. Ltd. niniejszym
oświadcza, że typ urządzenia
radiowego

Szczoteczka elektryczna MOVA
Fresh 20 Sensus jest zgodny z
dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst
deklaracji zgodności UE jest
dostępny pod następującym
adresem internetowym:

<https://files.innpro.pl/mova>

Adres producenta: 12th Floor,
Building 2, Wisdom Valley Park,
Suzhou (Taihu) Software Industrial
Park, No, 1463 Wuzhong Avenue,
Yuexi Street, Wuzhong Economic
Development Zone, Suzhou,
Jiangsu Province, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2.4Ghz
(2400Mhz - 2483.5Mhz)

Maksymalna moc częstotliwości
radiowej: <20dBm

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr 3

85057 Ingolstadt, DE

eurep@eurep-gmbh.de

Dane dotyczące baterii:

Typ: bateria litowa

Waga netto: 0.043 kg

Pojemność: 2000 mAh

Przekroczono dopuszczalną

zawartość kadmu (0,002%) lub

ołowiu (0,004%): nie