



BEAUTIFLY

TouchSense

Body

series




8-IN-1 ANTI-CELLULITE MASSAGER

USER MANUAL


 /beautifuly.global  /beautifuly_global

 /@beautifuly.global  /@beautifuly.global


f1

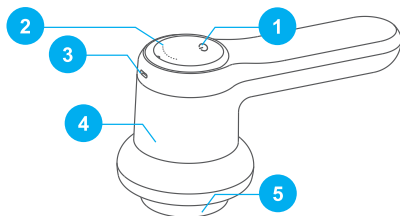

f2

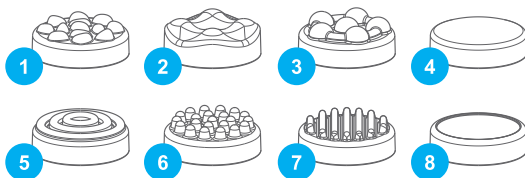

f3

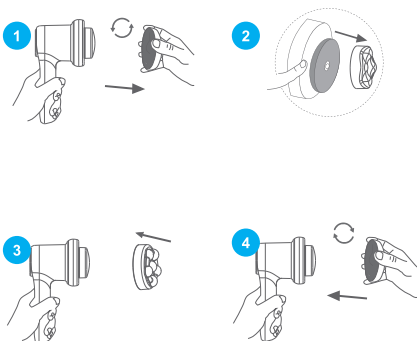

f4

[youtube.com/@beautifly.global](https://www.youtube.com/@beautifly.global)



[facebook.com/beautifly.global](https://www.facebook.com/beautifly.global)



Napięcie znamionowe: DC 5V
Natężenie znamionowe: 1A
Moc: 16W
Timer: 15 minut
Zakres długości fali: 620 - 640nm



Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2 - f1]:

1. Wskaźnik mocy / poziomu baterii.
2. Włącznik / regulacja mocy.
3. Złącze ładowania.
4. Korpus urządzenia.
5. Głowica masująca.

Opis części zamiennych [strona 2 - f2]:

1. Głowica kwiatowa.
2. Głowica falista.
3. Głowica rolkowa.
4. Głowica płaska.
5. Głowica pierścieniowa.
6. Głowica szczotkowa.
7. Głowica liniowa.
8. Głowica ze ściemną powierzchnią.

Obsługa [strona 2 - f3]:

1. Trzymaj urządzenie w ręce. Chwyc osłonę i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.
2. Znajdź dwie małe szczeliny pomiędzy głowicą a korpusem urządzenia. Chwyc w tych miejscach i pociągnij, aby wyjąć element.
3. Wymień głowicę masującą na wybraną i skieruj ją we właściwe miejsce, a następnie dociśnij.
4. Nałóż osłonę siatkową i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopasowując do gwintu, aż zostanie prawidłowo dokręcona.

Konserwacja i przechowywanie

1. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej ściereczki lub delikatnego środka czyszczącego. Głowice masujące można myć bezpośrednio pod bieżącą wodą.
2. Trzymaj wodę, płyny oraz wilgoć z dala od urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić wewnętrzne komponenty elektroniczne.

Ostrzeżenia

1. Używaj urządzenia dopiero godzinę po posiłku.
2. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
3. Nie używaj urządzenia w łazience ani w miejscach o wysokiej wilgotności. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Trzymaj z dala od cieczy oraz źródeł ciepła. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
4. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych.
5. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą głowic masujących.
6. Nie odkręcaj śrub ani nie próbuj demontować urządzenia.
7. Nie używaj żadnej głowicy masującej bez osłony siatkowej w pobliżu włosów.
8. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby z chorobami skóry, np. aktywne stany zapalne (np. trądzik ropowiczy, egzema), infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze (np. opryszczka), otwarte rany, oparzenia; osoby z chorobami autoimmunologicznymi; osoby z chorobami nowotworowymi - szczególnie w miejscu zmiany lub w trakcie leczenia (np. rak skóry); kobiety w ciąży; osoby z chorobami układu krążenia, np. nadciśnienie tętnicze, żyłaki, zakrzepica; osoby z zaburzeniami czucia, np. neuropatia przy cukrzycy; osoby z implantami medycznymi, np. rozrusznik serca (rozszerznik serca); osoby przyjmujące leki światłoczułujące, np. niektóre antybiotyki, retinoidy; dzieci. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, osoby po operacjach, osoby z przewlekłym bólem o nieznanej przyczynie.
9. Masażer wibracyjny z funkcją czerwonego światła został zaprojektowany w celu poprawy codziennego komfortu

- użytkownika poprzez połączenie delikatnych wibracji oraz światła o ciepłej barwie. Regularne stosowanie urządzenia może przyczynić się do: odczucia rozluźnienia napiętych obszarów ciała, poprawy samopoczucia i relaksacji po wysiłku fizycznym lub dniu pracy, wspierania uczucia odprężenia mięśni, poprawy odczuwalnej elastyczności skóry, nadania skórze bardziej wypoczętego i promiennego wyglądu. Emitowane czerwone światło tworzy przyjemne wrażenie ciepła, co może sprzyjać relaksowi i komfortowi podczas użytkowania. Wibracje urządzenia zapewniają delikatny masaż powierzchniowy, który może być odbierany jako kojący i odprężający.
10. Mimo że wyrób został zaprojektowany z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i wyposażony w mechanizmy ograniczające potencjalne zagrożenia, jego stosowanie może wiązać się z pewnym ryzykiem rezydualnym. Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić: przejściowe zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, uczucie dyskomfortu przy zbyt długim lub zbyt intensywnym stosowaniu, nadmierne nagrzanie skóry w miejscu aplikacji, nasilenie istniejących dolegliwości (np. w przypadku niewłaściwego użycia), reakcje nadwrażliwości na światło u osób podatnych.
11. Aby korzystanie z urządzenia było bezpieczne: stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją (czas, częstotliwość, obszary ciała), nie używaj na uszkodzonej lub chorej skórze, przerwij stosowanie w przypadku bólu, pieczenia lub dyskomfortu, konsultuj się ze specjalistą, jeśli masz choroby przewlekłe lub wątpliwości, nie stosuj urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta.
12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą.
13. Masażer wibracyjny z funkcją czerwonego światła jest wyrobem wielokrotnego użytku, przeznaczonym do stosowania przez dłuższy czas. Przewidywany okres bezpiecznego użytkowania wynosi od 2 do 5 lat, w zależności od częstotliwości użytkowania oraz prawidłowej konserwacji urządzenia. Po tym czasie skuteczność i bezpieczeństwo działania mogą ulec stopniowemu obniżeniu.
14. Aby zachować bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzenia, użytkownik powinien: regularnie czyścić urządzenie zgodnie z instrukcją, sprawdzać stan techniczny (np. obudowę, przewody, elementów emitujących światło), nie używać urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń, przechowywać wyrób w suchym i czystym miejscu, zabezpieczać przed dostępem do oryginalnych lub zalecanych akcesoriów.
15. Zalecana częstotliwość: 1 raz dziennie lub 3–5 razy w tygodniu, maksymalna częstotliwość: 2 razy dziennie (z zachowaniem odstępu min. 6–8 godzin).
16. W przypadku przekroczenia zalecanych parametrów (czasu, częstotliwości lub intensywności) mogą wystąpić: podrażnienia skóry (zaczerwienienie, pieczenie, suchość), przegrzanie tkanek powierzchniowych, zwiększona wrażliwość skóry na dotyk lub światło, uczucie dyskomfortu lub bólu w miejscu stosowania, nasilenie istniejących dolegliwości skórnych lub mięśniowych, przejściowe pogorszenie samopoczucia w wyniku nadmiernej stymulacji.
17. Powierzchnia skóry, na której stosowany jest zabieg, powinna być stosunkowo gładka i pozbawiona dużych nierówności (np. blizny, guzki, zmiany skórne).
18. Każda sesja zabiegowa powinna obejmować odrębny obszar skóry, którego wielkość nie przekracza maksymalnej zalecanej powierzchni poddawanej zabiegowi. Nakładanie się obszarów zabiegowych powinno być minimalne i ograniczone do małych fragmentów skóry, aby uniknąć nadmiernej kumulacji energii. Obszary poddawane zabiegowi powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby zachować równomierny odstęp pomiędzy kolejnymi zastosowaniami.
19. Regularnie kontrolować stan techniczny urządzenia (obudowa, przewody, źródła światła). Zaprzestać używania w przypadku widocznych uszkodzeń lub nieprawidłowego działania. Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, chroniąc przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
20. Przed zabiegiem skórę oczyścić i pozostawić suchą; stosować delikatne, neutralne kosmetyki po zabiegu. Niektóre preparaty mogą wpływać na skuteczność zabiegu lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Preparaty zawierające retinoidy, kwasy AHA/BHA, witaminę C w wysokim stężeniu. Mogą zwiększać wrażliwość skóry na promieniowanie czerwone i wibracje, co może prowadzić do podrażnień lub zaczerwienienia. Produkty z wysoką zawartością alkoholu. Mogą wysuszać skórę i zwiększać ryzyko dyskomfortu podczas zabiegu. Preparaty rozgrzewające lub chłodzące. Mogą nasilać uczucie ciepła lub zmieniać odczuwanie wibracji.
21. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania leków mogących wpływać na skórę lub reakcję na światło. Leki fotouczulające (np. niektóre antybiotyki, leki przeciwhistaminowe, leki stosowane w terapii nowotworowej). Mogą zwiększać wrażliwość skóry na światło, prowadząc do ryzyka poparzeń lub podrażnień. Leki przeciwzapalne i sterydowe stosowane miejscowo. Mogą zmniejszać odporność skóry na podrażnienia i wpływać na reakcję na światło czerwone. Leki przeciwzakrzepowe (doustne lub miejscowe). Mogą zwiększać ryzyko siniaków lub drobnych krwawień przy intensywnym masażu wibracyjnym.
22. Podczas stosowania urządzenia należy uwzględnić wpływ innych źródeł promieniowania na skórę, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji i zwiększonego ryzyka podrażnień lub dyskomfortu. Solarium i lampy UV.

Stosowanie promieniowania UV w tym samym okresie co zabieg może prowadzić do kumulacji efektu świetlnego i wzrostu ryzyka uszkodzeń skóry. Inne urządzenia emitujące światło czerwone lub podczerwone.



Stosowanie równocześnie lub w krótkich odstępach może zwiększać ryzyko przegrzania lub dyskomfortu.

23. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, w suchym otoczeniu i temperaturze powietrza od 10 do 30 C, nie należy korzystać z urządzenia w miejscach, w których bezpośrednio na skórę pada światło słoneczne

24. Stosuj odpowiednią ochronę oczu jeśli jesteś narażony na promieniowanie w wyniku odbicia, nieprawidłowego użycia lub nieumiejętnego obchodzenia się z wyrobem.

25. Nie używaj jednocześnie głowicy szczotkowej oraz głowicy z matową powierzchnią razem z osłoną siatkową

Użytkowanie i obsługa:

1. W przypadku niskiego poziomu baterii należy w pełni naładować urządzenie.

2. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz/Regulacja mocy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

3. Krótkie naciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz/Regulacja mocy pozwala zmienić prędkość zgodnie z potrzebami.

Do wyboru jest 9 poziomów.

4. Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od niższej prędkości masażu, a następnie stopniowe jej zwiększanie po adaptacji.

5. Aby utrzymać urządzenie w najlepszym stanie, zaleca się używanie go nie dłużej niż 15 minut jednorazowo; urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach ciągłej pracy.

6. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie.

Instrukcja ładowania:

1. Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania należy w pełni naładować urządzenie.

2. Przed rozpoczęciem ładowania wyłącz urządzenie i użyj dołączonego kabla USB.

3. Wskaźnik baterii miga podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym.

4. Po pełnym naładowaniu odłącz kabel USB od gniazda ładowania.

5. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy pamiętać o jego pełnym naładowaniu co najmniej raz na 3 miesiące.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f4]:

