

Xblitz®

HERO

Instrukcja obsługi w języku polskim - **PL**

User's manual in English language - **EN**

Uživatelská příručka v češtině - **CZ**

Bedienungsanleitung auf Deutsch - **DE**





Xblitz®

HERO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



Szanowny Kliencie,

dziękujemy za wybór Xblitz Hero. Zakupione urządzenie to alkomat z sensorem elektrochemicznym, służący do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. **Przed użyciem urządzenia, zapoznaj się z poniższą instrukcją.**


UWAGA! NIE POZWÓL SOBIE ANI NIKOMU INNEMU PROWADZIĆ POJAZDU PO SPOŻYCIU ALKOHOLU.

01. GŁÓWNE FUNKCJE

1. Niskie zużycie energii oraz szybka analiza dzięki 8-bitowemu mikroprocesorowi.
2. Elektrochemiczny czujnik alkoholu, który pozwala wykonać dokładne pomiary.
3. Czytelny wyświetlacz LCD.
4. Podświetlany wyświetlacz, dzięki któremu można używać urządzenia przy małej ilości światła.
5. Czytelne, proste w obsłudze klawisze.
6. Pamięć 10 ostatnich pomiarów.
7. Wskaźnik stanu baterii.
8. Wymienne ustniki zapewniają higieniczne użytkowanie urządzenia.
9. Dioda LED która wskazuje, czy wykonany pomiar przekracza poziom alarmowy.

02. OPIS URZĄDZENIA


1. Ustnik
2. Dioda LED
3. Wyświetlacz
4. Przyciski
5. Obudowa

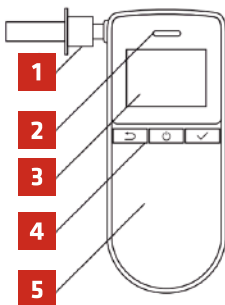

03. WYŚWIETLACZ

1. Wartość pomiaru
2. Czekaj
3. Dmuchaaj
4. Ostrzeżenie
5. Stan baterii
6. Jednostka pomiaru

PL

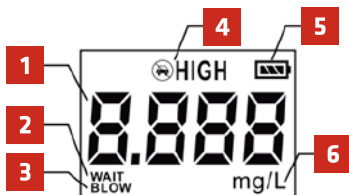

04. OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

a. Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie z tyłu urządzenia. Umieść w środku 2 baterie AAA 1.5V. Upewnij się, że bieguny baterii są zwrócone w odpowiednią stronę. Umieść pokrywę pojemnika na baterię z powrotem na miejscu.

b. Umieść czysty ustnik w urządzeniu. Jeśli nie masz pewności, gdzie i jak umieścić ustnik, zobacz diagram urządzenia w dziale OPIS URZĄDZENIA.

c. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, by włączyć urządzenie. Wyświetlacz urządzenia się włączy i pojawi się na nim 10-sekundowe odliczanie do rozgrzania czujnika urządzenia. Nie dmuchaj w ustnik w czasie rozgrzewania czujnika - wpłynie to na dokładność pomiaru.

d. Kiedy na ekranie wyświetlacza pojawi się ciąg liter „C” weź głęboki wdech i dmuchaj nieprzerwanie w ustnik, dopóki nie usłyszysz mechanicznego dźwięku dochodzącego „klik” z urządzenia. Po paru sekundach na ekranie wyświetli się wynik pomiaru.

UWAGA: Jeżeli w czasie dmuchania przepływ powietrza jest za mały lub zostanie przerwany, na wyświetlaczu pojawi się wiadomość „Err0”. Przed wykonaniem ponownego pomiaru, odczekaj kilka sekund.

e. Jeżeli wynik pomiaru jest poniżej progu alarmowego, dioda LED podświetli się na zielono. Jeżeli wynik pomiaru jest powyżej progu alarmowego, dioda LED podświetli się na czerwono, a z urządzenia rozlegnie się sygnał alarmowy.

f. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć wyświetlanie się wyniku i zacząć kolejny pomiar.

g. W przypadku dłuższego braku aktywności alkomat wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać baterie.

UWAGA: Jeżeli test powtarzany jest wielokrotnie, należy wymienić ustnik na nowy co 10 pomiarów lub wyczyścić ustnik z zalegającej w nim wody/ śliny. Obecność wody/ śliny w ustniku może powodować błędy pomiaru.

2. PRZEGLĄDANIE ZAPISANYCH POMIARÓW

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij , aby przejrzeć historię wykonanych pomiarów. Pierwszy zapis, który wyświetli się na ekranie to ostatnio wykonany pomiar. Urządzenie może zapisać do 10 ostatnio wykonanych pomiarów. Naciśnij , aby wrócić do trybu pomiaru.

3. USTAWIENIA FUNKCJI

a. Wejście w tryb ustawień:

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij  a następnie naciśnij , aby przejść do trybu ustawień.



b. Zmiana jednostki:

W trybie ustawień, naciśnij , aby zmienić migającą cyfrę i , aby zatwierdzić wybór.

Wpisz 1111 aby zmienić jednostkę pomiaru (domyślnie - mg/L). Naciśnij , aby zmienić jednostkę , aby zatwierdzić wybór i przejść do następnej cyfry.

Naciśnij , aby wrócić do trybu pomiaru.

c. Ustawienie progu alarmowego:

Wpisz 1112, aby zmienić próg alarmowy pomiaru. Naciśnij , aby zmienić migającą cyfrę i , aby zatwierdzić wybór. Naciśnij , aby wrócić do trybu pomiaru.

Domyślnie próg alarmowy urządzenia jest ustawiony na 0.2‰BAC.



UWAGA: Jeśli zapiszesz zmianę jednostki lub progu alarmowego, zapisane w pamięci pomiary zostaną usunięte.

4. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie.

05. SPECYFIKACJA

Czujnik:	Elektrochemiczny
Zakres pomiaru:	0~2.000mg/L (0~440mg/100mL; 0~0.400‰BAC; 0~4.000‰BAC; 0~4.000g/L)
Rozdzielczość pomiaru:	0.001mg/L
Czas rozgrzewania czujnika:	10s
Warunki pracy (temperatura):	0 - 40°C, wilgotność: 20-80% RH
Warunki przechowywania:	0- 50°C, wilgotność: ≤90% RH
Wyświetlacz:	1.5 cala LCD
Pamięć:	Do 10 wykonanych pomiarów
Zasilanie:	2x bateria AAA 1.5V
Wymiary:	127x 53x 22 mm
Waga:	70 g (bez baterii)
Błąd pomiaru:	±0.1‰BAC < 0.8‰BAC; ±10% w zakresie 0.8‰BAC ≤ C < 2‰BAC; ±30% w zakresie poniżej 0.400‰

PL

06. KARTA GWARANCJI

Produkt objęty jest 60-miesięczną gwarancją. Warunki gwarancji można znaleźć na stronie:

<https://xblitz.pl/gwarancja>

Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem:

<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: **www.xblitz.pl**

Numer seryjny.....

Gwarancja jest ważna tylko w przypadku regularnego serwisowania i kalibrowania urządzenia w autoryzowanym serwisie. Nie rzadziej niż 1 raz w roku. Urządzenie od nowości jest poprawnie skalibrowane. Każdy oferowany na rynku alkomat wymaga okresowej kalibracji tzn. co ok. 12 miesięcy (zaleca się co 6 miesięcy) należy skonfigurować urządzenie tak, aby poprawnie interpretowało ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Potrzeba ponownej kalibracji nie jest wadą urządzenia i nie podlega gwarancji. Urządzenie nie regularnie kalibrowane będzie pokazywało błędne wyniki.

Producent:

KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.

Ujastek 5B,

31-752 Kraków, Polska

Wyprodukowano w P.R.C.



Umieszczony symbol przekreślonego kosza na śmieci informuje, że nieprzydatnych urządzeń elektrycznych czy elektronicznych, jego akcesoriów (takich jak: zasilacze, przewody) lub podzespołów (na przykład baterie, jeśli dołączono) nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Właściwe działania w wypadku konieczności utylizacji urządzeń czy podzespołów (na przykład baterii) lub ich recyklingu polega na oddaniu urządzenia do punktu zbiórki, w którym zostanie ono bezpłatnie przyjęte. Utylizacja podlega wersji przekształconej dyrektywy WEEE (2012/19/UE) oraz dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Właściwa utylizacja urządzenia zapobiega degradacji środowiska naturalnego. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą/mi przewidzianymi prawem obowiązującym na danym terenie.



07. KARTA KALIBRACJI

<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>
<i>Dane sprzedawcy:</i>	<i>Data kalibracji:</i>





HERO

USER'S MANUAL

EN



Dear Customer,

thank you for purchasing Xbitz Hero. The purchased device is a breathalyzer with an electrochemical fuel cell sensor, used to measure the alcohol content in exhaled air.

Before using the device, please read the instructions below.


WARNING! DON'T LET YOURSELF OR ANYONE ELSE DRIVE AFTER DRINKING ALCOHOL.

01. MAIN FEATURES

1. Low power consumption and fast analysis thanks to an 8-bit microprocessor.
2. Electrochemical fuel cell sensor, which allows you to take accurate measurements of alcohol content.
3. Easy-to-read LCD display.
4. Display backlight that lets you use the device in dark places.
5. Big, easy-to-use buttons.
6. Memory of the last 10 measurements taken
7. Battery status indicator
8. Interchangeable mouthpieces ensure hygienic use of the device
9. Indicator light that shows if the measurement is above alarm level

02. DEVICE DESCRIPTION


1. Mouthpiece
2. Indicator LED
3. Display screen
4. Buttons
5. Housing

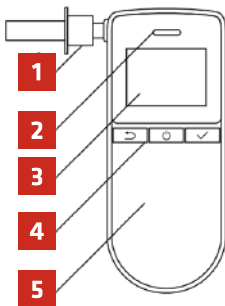

03. DISPLAY

1. Measurement value
2. Wait
3. Blow
4. Warning
5. Battery status
6. Measurement unit

EN

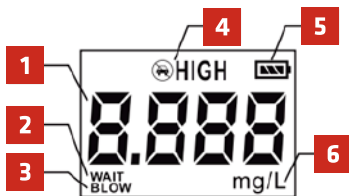

04. USING THE DEVICE

1. PREPARING FOR MEASUREMENT

- Remove the battery compartment cover on the back of the device. Place two 1.5V AAA batteries inside. Make sure that the battery poles are facing the correct direction. Place the battery compartment cover back in place.
 - Place a clean mouthpiece in the machine. If you are not sure where and how to put the mouthpiece, see the device diagram in the DEVICE DESCRIPTION section.
 - Press and hold the  button until you hear a short beep to turn on your device. The device display turns on and a 10-second countdown for sensor warm-up shows up on the display. Do not blow into the mouthpiece while the sensor is warming up – this will affect the accuracy of the measurement.
 - When a string of "C" appears on the display screen, take a deep breath and blow continuously into the mouthpiece until you hear a mechanical "click" sound from the device. After a few seconds, the measurement result will be displayed on the screen.
- NOTE:** If the airflow is too low or interrupted during blowing, the message "Err0" will appear on the display. Wait a few seconds before starting the test again.
- If the measurement result is below the alarm threshold, the indicator LED will turn green. If the measurement result is above the alarm threshold, the indicator LED turns red and an alarm signal will sound from the device.

f. Press the  button to turn off the result and start the next measurement.

g. In case of prolonged inactivity, the breathalyzer will turn off automatically to save batteries.

NOTE: If the test is repeated multiple times, replace the mouthpiece with a new mouthpiece every 10 measurements or clean the water/ saliva residue from inside the mouthpiece. The presence of water/ saliva in the mouthpiece can cause measurement errors.

2. VIEW SAVED MEASUREMENTS

When the device is turned on, press  to view the history of your measurements. The first recording that will be displayed on the screen is the last measurement taken. The device can record up to 10 measurements taken. Press  to return to measurement mode.

3. SETTINGS

a. Entering settings mode:

When your device is turned on, press  and then press  to enter settings mode.



b. Changing the unit of measurement:

In settings mode, press  to change the flashing digit and then press  to approve the selection.

Type 111 to change the measurement unit (mg/L by default). Tap  to change the unit and tap  to approve the selection. Press  to return to measurement mode.

c. Setting the alarm threshold:

Type 1112 to change the measurement alarm threshold. Tap  to switch to the next digit and press  to confirm the selection. Press  to return to measurement mode. By default, the alarm threshold for the device is set to 0.2‰ BAC.



NOTE: If you change the measurement unit or alarm threshold, the measurements stored in memory will be deleted.

4. TURNING OFF THE DEVICE

Hold , to turn off the device.

05. SPECIFICATION

Sensor: Electrochemical fuel cell

Measurement range: 0~2.000mg/L (0~440mg/100mL;
0~0.400%BAC; 0~4.000‰BAC;
0~4.000g/L)

Measurement resolution: 0.001mg/L

Sensor warm-up time: 10s

Operating conditions: 0 - 40°C, humidity: 20-80% RH

Storage conditions: 0- 50°C, humidity: ≤90% RH

Display: 1.5 cala LCD

Memory: Up to 10 measurements taken

Power supply: 2x AAA 1.5V battery

Dimensions: 127x 53x 22 mm

Weight: 70 g (without batteries)

Measurement error: ±0.1‰BAC for <0.8‰BAC;
±10% in the range from 0.8‰BAC
to 2‰BAC; ±30% in the range
from 2‰BAC to 0.400‰

EN

06. WARRANTY CARD

The product is covered by the 60-months warranty.
Warranty conditions can be found on the website:
<https://xblitz.pl/warranty>

Complaints should be reported via the complaint
form located on the website:
<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Details, contact and service address may be found at:
www.xblitz.pl

Serial number.....

The warranty is only valid for regular servicing
and calibration of the device at an authorized service
center. No less than once a year. The device from
the novelty is properly calibrated. Each breathalyzer
offered on the market requires periodic calibration,
ie every 12 months (recommended every 6 months),
the device should be configured to correctly interpret
the amount of alcohol in the exhaled air. The need for
recalibration is not a device disadvantage and is not
covered by the warranty. The device not regularly
calibrated will show incorrect results.

Manufacturer:

KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Cracow, Poland

Made in P.R.C.



The crossed out trash can symbol indicates that unusable electrical or electronic devices, its accessories (such as power supplies, cords) or components (for example batteries, if included) cannot be disposed of alongside with household waste. In order to dispose of the devices or its components (for example, batteries) deliver the device to the collection point, where it will be accepted free of charge. Disposal is subject to the recast version of the WEEE Directive (2012/19 / EU) and the Directive on batteries and accumulators (2006/66 / EC). Proper disposal of the device prevents degradation of the natural environment. Information about the collection points of the facilities is issued by the competent local authorities. Incorrect disposal of waste is subject to penalties provided for by the law in force in the given area.



07. CALIBRATION CARD

<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>
<i>Seller's details:</i>	<i>Calibration date:</i>



Xblitz®

HERO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ



Vážený zákazníku,

děkujeme za nákup Xbitz Hero.

Zakoupené zařízení je Alkotester s elektrochemickým senzorem, sloužící k měření obsahu alkoholu ve vydechovaném vzduchu.

Před použitím si prosím přečtěte níže uvedené pokyny.


**VAROVÁNÍ! NENECHTE SEBE ANI NIKOHO JINÉHO
ŘÍDIT VOZIDLO PO POŽITÍ ALKOHOLU.**

01. HLAVNÍ FUNKCE

1. Nízká spotřeba energie a rychlá analýza díky 8 bitovému mikroprocesoru.
2. Elektrochemický senzor alkoholu, který umožňuje provádět přesné měření.
3. Čitelný LCD displej.
4. Podsvícený displej, pomocí kterého můžete používat zařízení i při malém množství světla .
5. Čitelná, snadno použitelná tlačítka.
6. Paměť 10 posledních měření.
7. Ukazatel stavu baterie.
8. Vyměnitelné náustky zajišťují hygienické použití zařízení.
9. LED dioda informující, zda provedené měření překračuje úroveň alarmu.


02. POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Náustek
2. LED dioda
3. Displej
4. Tlačítka
5. Pouzdro

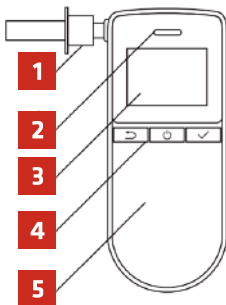

03. DISPLEJ

1. Hodnota měření
2. Čekej
3. Foukej
4. Upozornění
5. Stav baterie
6. Měrná jednotka

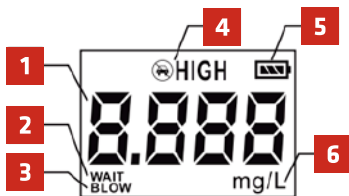

CZ

04. OBSLUHA ZAŘÍZENÍ

1. PŘÍPRAVA NA MĚŘENÍ

- a.** Odstraňte víko prostoru na baterie na zadní straně zařízení. Umístěte uvnitř 2 baterie AAA 1.5 V. Zkontrolujte, zda jsou póly baterie otočeny správným směrem. Namontujte víko prostoru na baterie na místo.
- b.** Umístěte čistý náustek do zařízení. Pokud nevíte, kde a jak umístit náustek, podívejte se na obrázek zařízení v části POPIS ZAŘÍZENÍ.
- c.** Stiskněte a podržte tlačítko  dokud neuslyšíte krátké pípnutí signalizující zapnutí zařízení. Displej zařízení se zapne a objeví se na něm desetivteřinové odpočítávání do zahřátí senzoru zařízení. Během zahřívání senzoru nefoukejte do náustku - ovlivní to přesnost měření.
- d.** Jakmile se na displeji objeví sled písmen "C", zhluboka se nadechněte a nepřetržitě foukejte do náustku, dokud neuslyšíte mechanický zvuk "kliknutí", pocházející ze zařízení. Po několika sekundách se na displeji zobrazí výsledek měření.
POZOR: Pokud je průtok vzduchu během vyfukování příliš malý nebo přerušovaný, zobrazí se na displeji zpráva "Err0". Před opětovným měřením počkejte několik sekund.
- e.** Pokud je výsledek měření pod prahem alarmu, LED dioda se rozsvítí zeleně. Pokud je výsledek měření nad prahem alarmu, LED dioda se rozsvítí červeně a z přístroje bude slyšet zvuk alarmu.

f. Stisknutím tlačítka  vypnete zobrazení výsledku a spustíte další měření.

g. V případě delší nečinnosti se alko test automaticky vypne, aby se šetřila baterie.

POZOR: Pokud se test opakuje několikrát, vyměňte náustek za nový každých 10 měření nebo vyčistěte náustek z vody / slin. Přítomnost vody/ slin v náustku může vést k chybám měření.

2. PROHLÍŽENÍ ULOŽENÝCH MĚŘENÍ

Pokud je zařízení zapnuté, stisknutím  zobrazíte historii provedených měření. První záznam, který se objeví na displeji, je poslední provedené měření. Zařízení může uložit až 10 posledně provedených měření.

Stisknutím  se vrátíte do režimu měření.

3. NASTAVENÍ FUNKCÍ

a. Vstup do režimu nastavení:

Když je zařízení zapnuté, stiskněte  a následně stiskněte  pro přechod do režimu nastavení.



b. Změna jednotky:

V režimu nastavení stiskněte  pro změnu blikající číslce a  pro potvrzení výběru.

Zadejte 1111 pro změnu jednotky měření (výchozí je mg/L).

Stiskněte  pro změnu měrné jednotky,  pro potvrzení výběru a přejděte na další číslici. Stiskněte  pro návrat do režimu měření.

c. Nastavení prahové hodnoty alarmu:

Zadejte 1112 pro změnu prahové hodnoty alarmu měření.

Stiskněte  pro změnu blikající číslce a  pro potvrzení výběru. Stiskněte  pro návrat do režimu měření. Výchozí prahová hodnota alarmu zařízení je nastavena na 0.2‰BAC



POZOR: Pokud uložíte změnu jednotky nebo prahové hodnoty alarmu, měření uložená v paměti budou odstraněna.

4. VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Podržte  pro vypnutí zařízení.

05. SPECIFIKACE

- Snímač:** Elektrochemický
- Rozsah měření:** 0~2.000mg/L (0~440mg/100mL;
0~0.400%BAC; 0~4.000‰BAC;
0~4.000g/L)
- Rozlišení měření:** 0.001 mg/L
- Doba zahřívání snímače:** 10s
- Provozní stav:** 0-40°C, vlhkost: 20-80% RH
- Skladovací podmínky:** 0-50°C, vlhkost: ≤90% RH
- Displej:** 1.5 palcový LCD
- Paměť:** až 10 provedených měření
- Napájení:** 2x baterie AAA 1.5 V
- Rozměry:** 127x 53x 22 mm
- Hmotnost:** 70g (bez baterií)
- Chyba měření:** $\pm 0.1\text{‰BAC} < 0.8\text{‰BAC}$; $\pm 10\%$
v rozsahu $0.8\text{‰BAC} \leq C < 2\text{‰BAC}$;
 $\pm 30\%$ v rozsahu pod 0.400‰

CZ

06. ZÁRUČNÍ LIST/ REKLAMACE

Na výrobek se vztahuje 60 měsíční záruka výrobce.

Podmínky záruky naleznete na adrese:

<https://xblitz.pl/gwarancja>

Reklamacie by měly být hlášeny prostřednictvím reklamačního formuláře který se nachází na adrese:

<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Podrobnosti, kontaktní údaje a adresu servisu naleznete na straně: **www.xblitz.pl**

Sériové číslo.....

Záruka platí pouze pro pravidelnou údržbu a kalibraci přístroje v autorizovaném servisním středisku. Nejméně jednou za rok. Zařízení z novosti je správně kalibrováno. Každá nabízená na trhu dýchací přístroj vyžaduje pravidelnou kalibraci, tj. každých 12 měsíců (doporučuje se každých 6 měsíců) zařízení by mělo být nakonfigurováno tak, aby správně interpretovalo množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Potřeba recalibrace není nevýhodou zařízení a není pokryta zárukou. Zobrazí se zařízení, které není pravidelně kalibrováno nesprávné výsledky.



Symbol přeškrtnutého koše označuje, že nepoužitelná elektrická nebo elektronická zařízení, jejich příslušenství (např. Napájecí zdroje, šňůry) nebo komponenty (například baterie, pokud jsou součástí dodávky) nemohou být likvidovány společně s domovním odpadem. Správná opatření v případě nutnosti likvidace zařízení nebo komponentů (například baterií) nebo jejich recyklace spočívá v tom, že zařízení bude umístěno do sběrného místa, kde bude zařízení bezplatně přijato. Likvidace podléhá přepracovanému znění směrnice WEEE (2012/19 / EU) a směrnice o bateriích a akumulátorech (2006/66/ ES). Správná likvidace zařízení zabraňuje degradaci přírodního prostředí. Informace o sběrných místech zařízení vydávají příslušné místní úřady. Nesprávná likvidace odpadu je ohrožena sankcemi stanovenými právními předpisy platnými v dané oblasti.



Výrobce:

KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.

Ujastek 5B,

31-752 Krakov, Polsko

Vyrobena w P.R.C.

07. KALIBRAČNÍ KARTA

<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>
<i>Podrobnosti prodávajícího:</i>	<i>Datum kalibrace:</i>



Xblitz®

HERO

BEDIENUNGSANLEITUNG



DE

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich Xbitz Hero entschieden haben. Bei dem gekauften Gerät handelt es sich um einen Atemalkoholtestgerät mit einem elektrochemischen Sensor, mit dem der Alkoholgehalt in der ausgeatmeten Luft gemessen wird.

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die nachstehend Anleitung.


WARNUNG! LASS DICH ODER ANDERE NICHT FAHREN SIE EIN FAHRZEUG, NACHDEM SIE ALKOHOL GETRUNKEN HABEN.

01. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

1. Geringer Stromverbrauch und schnelle Analyse mit 8-Bit-Mikroprozessor.
2. Elektrochemischer Alkoholsensor, der genaue Messungen ermöglicht.
3. Klare LCD-Anzeige.
4. Beleuchtetes Display, das es Ihnen erlaubt, das Gerät bei wenig Licht zu benutzen .
5. Klare und benutzerfreundliche Tasten.
6. Speicher für die letzten 10 Messungen.
7. Anzeige des Batteriestatus.
8. Auswechselbare Mundstücke für den hygienischen Gebrauch.
9. LED, die anzeigt, ob die durchgeführte Messung den Alarmpegel überschreitet.


02. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

1. Mundstück
2. LED
3. Display
4. Tasten
5. Gehäuse

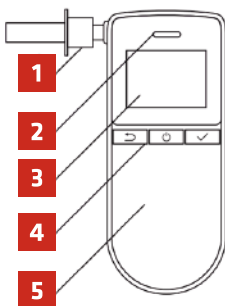

03. DISPLAY

1. Messwert
2. Warten
3. Blasen
4. Warnung
5. Batteriestatus
6. Meßeinheit

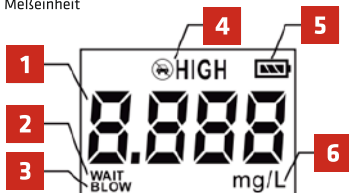

04. BEDIENUNG

DE

1. VORBEREITUNG DER MESSUNG

a. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts. Legen Sie 2 AAA-Batterien 1,5V ein. Achten Sie darauf, dass die Batteriepole in die richtige Richtung zeigen. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz.

b. Legen Sie ein sauberes Mundstück in das Gerät ein. Wenn Sie nicht sicher sind, wo und wie das Mundstück zu platzieren ist, sehen Sie sich das Geräteschema im Abschnitt BESCHREIBUNG DES GERÄTS an.

c. Halten Sie die Taste gedrückt,  bis Sie einen kurzen Piepton hören, um das Gerät einzuschalten.

Die Geräteanzeige schaltet sich ein und es erscheint ein 10-Sekunden-Countdown zum Aufwärmen des Gerätesensors. Blasen Sie nicht in das Mundstück, während sich der Sensor erwärmt - dies beeinträchtigt die Genauigkeit der Messung.

d. Wenn der Buchstabe "C" auf dem Anzeigebildschirm erscheint, atmen Sie tief ein und blasen Sie kontinuierlich in das Mundstück, bis Sie ein mechanisches "Klick"-Geräusch aus dem Gerät hören. Nach einigen Sekunden wird das Messergebnis auf dem Bildschirm angezeigt.

HINWEIS: Wenn der Luftstrom zu gering ist oder während des Blasens unterbrochen wird, zeigt das Display "Err0" an. Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die Messung erneut durchführen.

e. Wenn das Messergebnis unter der Alarmschwelle liegt, leuchtet die LED grün. Wenn das Messergebnis über der Alarmschwelle liegt, leuchtet die LED rot auf und ein Alarmsignal ertönt vom Gerät.

f. Drücken Sie die Taste ☐ um die Ergebnisanzeige auszuschalten und eine weitere Messung zu starten.

g. Bei längerer Inaktivität schaltet sich das Atemalkoholmessgerät automatisch ab, um Batterien zu sparen.

ANMERKUNG: Wenn der Test mehrmals wiederholt wird, ersetzen Sie das Mundstück alle 10 Messungen durch ein neues oder reinigen Sie das Mundstück Wasser/ Speichel. Das Vorhandensein von Wasser/ Speichel im Mundstück kann Messfehler verursachen.

2. ÜBERSICHT AUFGEZEICHNETER MESSUNGEN

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie ☐, um den Messverlauf anzuzeigen. Der erste Datensatz, der auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die zuletzt durchgeführte Messung. Das Gerät kann bis zu 10 der zuletzt durchgeführten Messungen aufzeichnen. Drücken Sie auf ☐, um zum Messmodus zurückzukehren.

3. EINSTELLUNGEN

a. Übergang zum Einstellmodus:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie erst ☐ a następnie und dann ☐, um in den Einstellmodus zu gelangen.



b. Änderung der Einheit:

Im Einstellmodus drücken Sie ☐, um die blinkende Ziffer zu ändern, und drücken Sie ☐, um die Auswahl zu bestätigen.

Geben Sie 1111 ein, um die Maßeinheit zu ändern (Standard - mg/L). Drücken Sie auf ☐, um die Einheit zu ändern, dann auf ☐, um zum Messmodus zurückzukehren.

Drücken Sie auf ☐, um zum Messmodus zurückzukehren. Standardmäßig ist die Alarmschwelle des Geräts auf 0,2‰BAC voreingestellt.



HINWEIS: Wenn Sie eine Änderung der Einheit oder der Alarmschwelle speichern, werden die gespeicherten Messungen gelöscht.

4. ABSCHALTEN DES GERÄTS

Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

05. SPEZIFIKATION

Sensor: Elektrochemisch

Messbereich: 0~2,000mg/L (0~440mg/100mL;
0~0,400‰BAC; 0~4,000‰BAC;
0~4,000g/L)

Auflösung der

Messung: 0,001mg/L

Sensor-Aufwärmzeit: 10s

Betriebsbedingungen: 0 - 40°C, Luftfeuchtigkeit:
20-80%RH

Lagerbedingungen: 0-50°C, Feuchtigkeit: ≤90% RH

Anzeige: 1,5-Zoll-LCD

Speicher: bis zu 10 Messungen

Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie 1.5v

Abmessungen: 127x 53x 22 mm

Gewicht: 70 g (ohne Batterie)

Messfehler: ±0.1‰BAC < 0.8‰BAC ; ±10% im
Bereich 0.8‰BAC ≤ C < 2‰BAC;
±30% im Bereich unter 0.400‰

DE

06. GARANTIESCHEIN

Das Produkt unterliegt der 60-monatigen Garantie.
Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:
<https://xblitz.pl/gwarancja-de>

Beschwerden sollten über das Beschwerdeformular
gemeldet werden befindet sich auf der Website:
<https://reklamacje.kgktrade.pl/>

Details, Kontakt und Service-Adresse finden Sie unter:
www.xblitz.pl

Ordnungsnummer.....

Die Garantie gilt nur für regelmäßige Wartung und Kalibrieren des Geräts in einem autorisierten Servicecenter. Nicht weniger als einmal im Jahr. Das Gerät von der Neuheit ist richtig kalibriert. Jeder auf dem Markt angebotenen der Alkoholtester muss regelmäßig kalibriert werden, dh alle ca. 12 Monate (empfohlen alle 6 Monate). Das Gerät sollte so konfiguriert werden, dass die Alkoholmenge richtig interpretiert wird in der ausgeatmeten Luft. Die Notwendigkeit einer Neukalibrierung ist kein Nachteil des Geräts und ist nicht von der Garantie abgedeckt. Das Gerät wird nicht regelmäßig kalibriert angezeigt falsche Ergebnisse.



Das durchgestrichene Mülleimersymbol weist darauf hin, dass unbrauchbare elektrische oder elektronische Geräte, deren Zubehör (z. B. Netzteile, Kabel) oder Komponenten (z. B. Batterien) nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Zur Entsorgung der Geräte oder ihrer Komponenten (z. B. Batterien) liefern Sie das Gerät an die Sammelstelle, wo es kostenlos entgegengenommen wird. Die Entsorgung unterliegt der Neufassung der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und der Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren (2006/66/EG). Die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts verhindert eine Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt. Informationen zu den Sammelstellen der Einrichtungen werden von den zuständigen örtlichen Behörden erteilt. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen unterliegt den in dem jeweiligen Gebiet geltenden Strafbestimmungen.



Hersteller:

KGK TRADE sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5B,
31-752 Krakau, Polen

Hergestellt in P.R.C.

07. KALIBRIERUNGSKARTE

<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>
<i>Verkäuferdetails:</i>	<i>Kalibrierdatum:</i>

DE

